

Sofia(ソフィア)取扱説明書

注意事項




- 長期間マットの上に重量物を置かないでください。マット表面には柔らかい素材を使用していますので、跡が残る恐れがあります。
- 汚れが付着したまま仕様されますとマット表面が劣化する恐れがありますので、定期的な清拭をお薦めします。
- 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所では保管しないでください。変色やカビなどが発生する恐れがあります。
- マットを折りたたまないでください。へたりや変形・破損の原因となります。
- 火気・高温の近くで使用しないでください。火災・変形の原因となります。

- ソフィア83cm幅／品番：MHA1083A(防水)、MHAV1083A(通気)
- ソフィア91cm幅／品番：MHA1091A(防水)、MHAV1091A(通気)
- ソフィア100cm幅／品番：MHA10100A(防水)、MHAV10100A(通気)
- ソフィア83cm幅ショートサイズ／品番：MHA1083SA(防水)、MHAV1083SA(通気)
- ソフィア91cm幅ショートサイズ／品番：MHA1091SA(防水)、MHAV1091SA(通気)

設置方法

1 マットレスを置きます


マットレスをベッドの上に置きます。

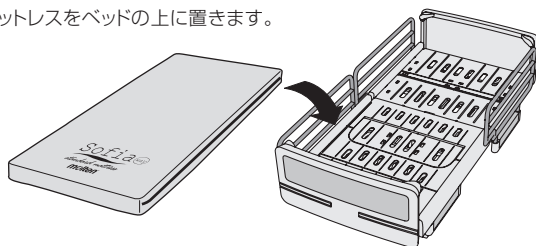

2 シーツを取り付け、ベッドメイキングをします

※サイドレールを必ず使用してください。

本体にしっかりとシーツを巻き込んでください。

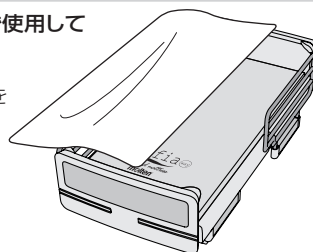

お手入れ方法

❗この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の意味です。

●洗 浄

[防水タイプ]

- ① 水またはお湯を染み込ませた布で専用カバーの汚れた部分を拭き取ってください。
 - ① 汚れがひどい場合は水またはお湯で薄めた家庭用中性洗剤を使用してください。
(酸性および強塩酸系の洗浄剤や漂白剤は使用しないでください。)
 - ① 専用カバーは取り外して洗濯してください。
(インナーカバーは外さないでください。)
- ※専用カバーは、マットレスの凹凸面にロゴ印刷面を合わせて取り付け、使用していただくことをお薦めします。
- ※インナーカバーのタグラベルがマットレスの足元側(ロゴ印刷側)になるように設置してください。




[通気タイプ]

- ① 専用カバーは取り外して洗濯してください。
(インナーカバーは外さないでください。)
- ※専用カバーは、マットレスの凹凸面にロゴ印刷面を合わせて取り付け、使用していただくことをお薦めします。
- ※インナーカバーのタグラベルがマットレスの足元側(ロゴ印刷側)になるように設置してください。

●消 毒

[防水タイプ]

- ① 消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ってください。
※消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。
原液のまま使用するとマット表面が劣化する恐れがあります。
※有機溶剤(シンナー、ベンジンなど)は使用しないでください。
- ① 熱消毒装置を使用する場合は温度80℃×1時間に設定してください。

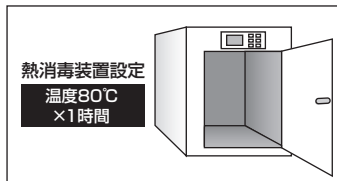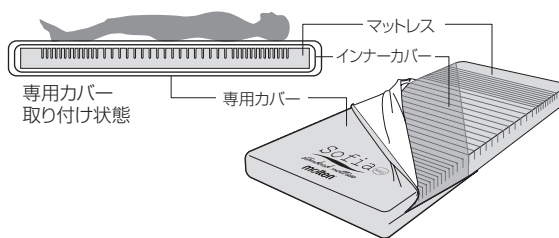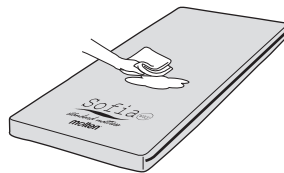

仕 様

ソフィア

TAISコード 防水タイプ/00054-000034
通気タイプ/00054-000035

ソフィア83cm幅	●サイズ：幅83×長さ191×厚さ10cm	●重量：6.3kg
ソフィア91cm幅	●サイズ：幅91×長さ191×厚さ10cm	●重量：6.8kg
ソフィア100cm幅	●サイズ：幅100×長さ191×厚さ10cm	●重量：7.3kg
ソフィア83cm幅ショートサイズ	●サイズ：幅83×長さ180×厚さ10cm	●重量：5.8kg
ソフィア91cm幅ショートサイズ	●サイズ：幅91×長さ180×厚さ10cm	●重量：6.3kg

- 素 材：防水タイプ カバー表面 = ウレタンフィルム(制菌加工仕様)
カバー裏面 = ポリエステル
通気タイプ カバー = ポリエステル
：マットレス = ウレタンフォーム インナーカバー = ポリエステル
- カラー：防水タイプ = グリーン 通気タイプ = ライトグリーン

開発・製造元



※健康用品事業本部にて取得しています。

株式会社 モルテン

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health

東京 札幌 仙台 名古屋 大阪 広島 福岡
製品他、各種お問い合わせは

〒739-1794 広島市安佐北区口田南2-18-12

TEL.082-842-9975

FAX 0120-769-123

E-mail:health@molten.co.jp